

Hoja de consejos sobre bolsas de reanimación

Resuscitation Bag Tip Sheet (Spanish)

- Válvula PEEP
PEEP Valve

Marque incrementos de 5 cmH2O
Dial in by increments of 5cmH2O

- Válvula de alivio de presión
(válvula de seguridad)
Pressure relief valve (Pop-off safety valve)

Deje el clip metálico en OFF (apagado), como se muestra en esta imagen. Esto permitirá que salga el exceso y la presión insegura. Este es un mecanismo de seguridad de la bolsa.

Leave the metal clip OFF, as displayed in this image. This will allow the excess and unsafe pressure to escape. This is a safety mechanism in this bag.


- Manómetro de presión
Pressure Manometer

Trate de obtener ~ 30 cmH2O cuando haga aspiraciones con bolsa. La flecha le indicará que está en la "zona amarilla" cuando alcance los 30 cmH2O.

Aim for ~ 30 cmH2O when bagging. Your arrow will indicate you're in the "yellow zone" when hitting 30 cmH2O.

Recuerde: Usted quiere ver una ELEVACION DEL PECHO cuando hace aspiraciones con bolsa.

Remember: You're looking for CHEST RISE when you are bagging.

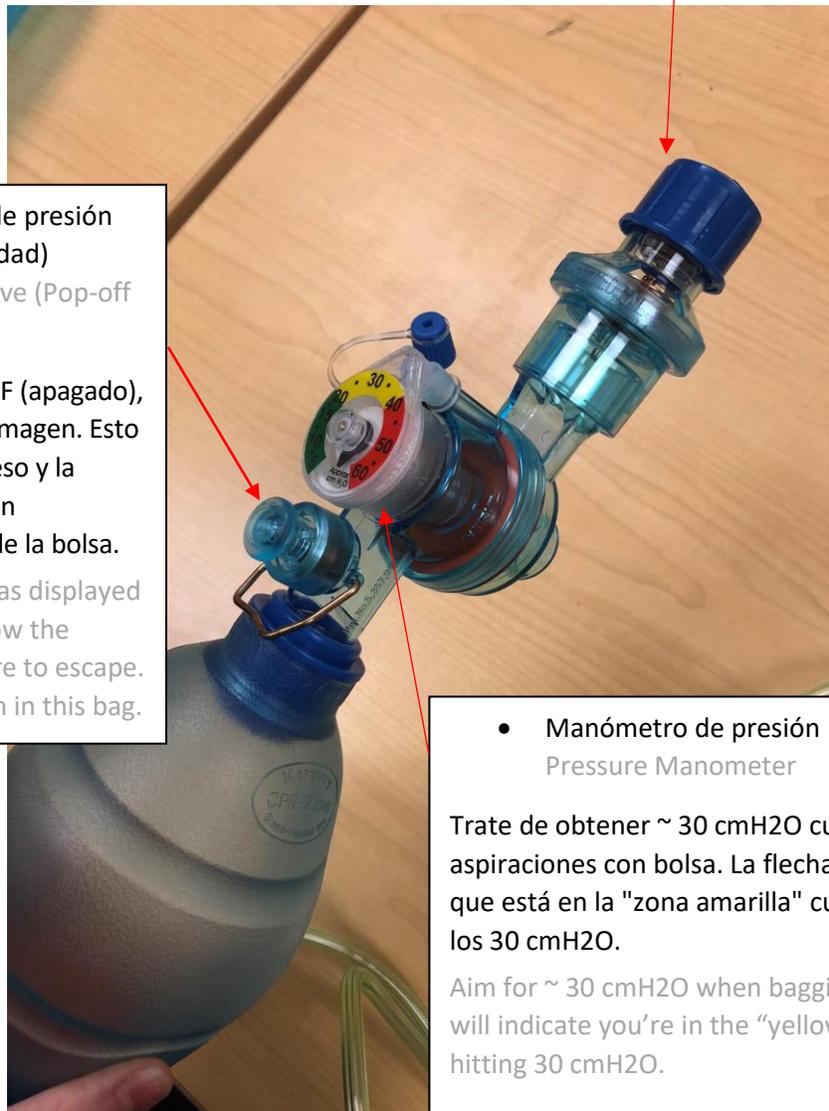

Exención de responsabilidad: Este documento contiene información o material educativo desarrollado por Michigan Medicine para pacientes típicos con su condición. Puede incluir enlaces a contenido en línea que no creó Michigan Medicine y por los que este no se hace responsable. No sustituye la recomendación médica de su proveedor de atención médica, ya que su experiencia puede ser diferente a la del paciente típico. Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre este documento, su condición o su plan de tratamiento.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

Author: University of Michigan Children's and Women's Hospital

Author: University of Michigan Children's and Women's Hospital

Educación para el paciente por [Michigan Medicine](#) tiene una licencia de [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#).

Última revisión en 01/2024

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 01/2024